



ChokeVac

Essential Rescue Device For Choking Emergency

[HANDLE]

Easy to use by every body.

[PLUNGER]

Generate negative pressure.

[VENT VALVE]

Discharge air from main body to ensure it can generate strong suction.

[FACE MASK]

Super soft face mask,gentle to skin and no worry of skull trauma.

Include:

One Adult Mask


One Pediatric Mask

HANDLE

PLUNGER

VENT VALVE

FACE MASK

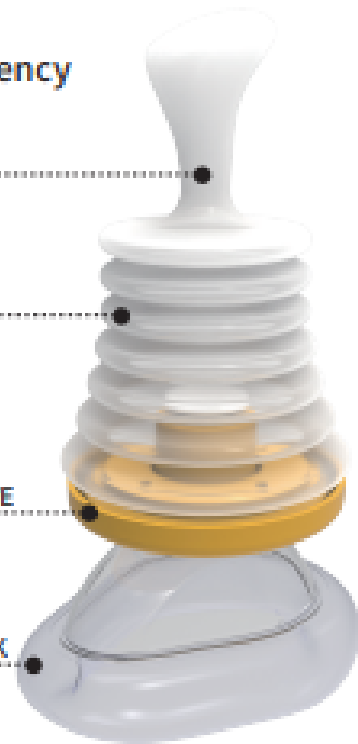

Easy to Use in a Choking Emergency



1 PLACE



2 PUSH



3 PULL

1 PLACE

Place the mask over the victim' s nose and mouth. Hold the mask with your weak hand to make a good all-around seal on the victim' s face.

2 PUSH

Push the plunger down with your strong hang,all air will escape out of the one-way valve system prevrntng an obstruction from being pushed further into the victim.

3 PULL

Pull back on the plunger while holding the mask in place.This will create suction.If the obstruction does not come out on the first pull,continue to push,and pull the plunger without removing the device from the victim' s face.

Importer details:

Yitzhak Atias

Bar Kochba 8 Petah Tikva

Phone: 054-8031-313

AMAR registration number: 37950001

Manufacturer details:

XIAMEN WINNWR MEDICAL CO.LTD
1507, No. 77, Lvling Road, Xiamen, Fujian,
China

MADE IN CHINA

The product is designed to remove a foreign body from the trachea

Safety warning: Do not use when not necessary

.to extract a foreign body

.Store in a shady place

הוראות שימוש במקרה חנק

1. הנח את המסכה כאשר החלל הפנימי של המסכה מכסה את הפה והאף של המטופל, השתמש ביד החלשה של כדי לבצע אטימה .



2. דחוף את ידית האחיזה באמצעות היד החזקה שלך כלפי מטה, פעולה זו תוציא את האויר האויר מחלל הבוכנה החוצה באמצעות השסתום החד כיווני, פעולה זו תמנע מהחסם בקנה הנשימה להיכנס עמוק יותר.



3. משוך לאחור את ידית האחיזה ביד החזיקה שלך. במקביל היד החלשה מהדקת ומחזיקה את המסיכה מעל האף והפה בכדי למנוע כניסה של אויר משולי המסיכה. פעולה זו יוצרת וואקום ושולפת את הגוף הזר החוצה, במידה והגוף הזר לא נפלט החוצה, בפעולה אחת להמשיך מספר פעמים עד לשליפת הגוף הזר



ChokeVac

מכשיר לחילוץ גוף זר במקרה של חנק



ידית אחיזה -

ידית קלה ונוחה לשימוש על ידי כל משתמש

בוכנה -

יוצרת לחץ שלילי

שסתום אויר -

פולט את האויר מחלל ההתקן כדי להבטיח יניקה חזקה.

מסיכת פנים -

מסכה רכה במיוחד עדינה ולא פוצעת או משאירה סימנים על העור בערכה קיימים 2 גדלים של מסכות למבוגר, ולילד.

180 mm

120 mm

פרטי יבואן :

יצחק אטיאס

בר כוכבא 8 פתח תקווה

טל: 054-8031-313

מספר רישום אמ"ר: 37950001

המוצר מיועד להוצאת גוף זר מקנה הנשימה
אזהרת בטיחות: אין להשתמש כאשר אין צורך
לחץ גוף זר.
לאחסן במקום מוצל .

פרטי יצרן:

XIAMEN WINNWR MEDICAL CO.LTD

1507, No. 77, Lvling Road, Xiamen, Fujian,
China

MADE IN CHINA

מיוצר בסין



ChokeVac

جهاز الإنقاذ الأساسي لحالات الاختناق

[المقبض]

سهل الاستخدام للجميع

[المكبس]

يولد ضغط سلبي

[صمام التهوية]

يخرج الهواء من الجسم الرئيسي لضمان توليد شفط قوي

[قناع الوجه]

قناع وجه فائق النعومة لطيف على البشرة ولا يسبب

مشاكل للجميع

المتضمن:

قناع للبالغين

قناع للأطفال

المقبض

المكبس

صمام التهوية

قناع الوجه



سهل الاستخدام في حالات الاختناق



1 ضع



2 أدفع



3 اسحب

رقم التسجيل عمار:

1 ضع

ضع القناع على أنف و فم المختنق . احمل القناع بيدك الضعيفة لتحقيق احكام حول وجه المختنق

2 أدفع

اضغط على المكبس بيدك القوية . سيتم تهوية كامل الهواء خارج النظام الذي يعمل بصمام واحد . مما يمنع تقدم الجسم العالق إلى داخل المختنق

3 اسحب

اسحب المكبس إلى الخلف و احتفظ بالقناع في مكانه , سيتم إنشاء شفط , اذا لم يخرج الجسم العالق في السحب الأول , ف استمر في الضغط و السحب على المكبس دون ازالة الجهاز من وجه المختنق

مع السلامة دائماً

تم تصميم المنتج لإزالة جسم غريب من القصبة الهوائية تحذير للسلامة: لا تستخدمه عندما لا تكون هناك حاجة لاستخراج جسم غريب.

تخزينها في مكان مظلل.

مستورد: يتسحاق أتياس، بار كوخبا 8، بتاح تكفا، هاتف -0548031313
رقم التسجيل عمار: 37950001

الشركة المصنعة: شركة شيامن الفائزة الطبية المحدودة

صنع في الصين

1507، رقم 77، طريق لفينغ، شيامن، فوجيان، الصين